

Brukermanual for:

Male Edge Basic, Male Edge Extra og Male Edge Pro


1



Kom i gang

Male Edge leveres satt sammen

2

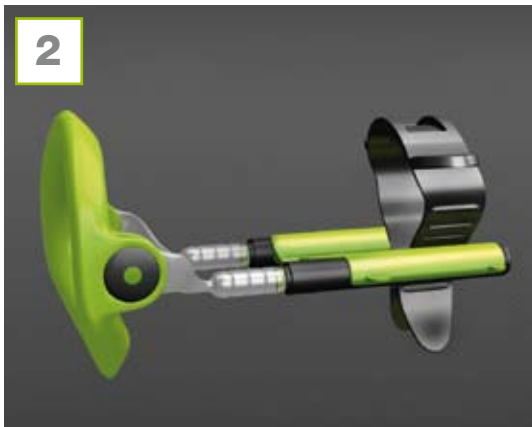

To veis front stykke

Hvis din penis er over 12,5 cm i avslappet og utstrekkt tilstand, skal du snu frontstykket/gummiringen rundt slik. Hvis du er under 12,5 cm i lengde, kan du la frontstykket være i originalposisjon.


3



Base ring

Løsne front stykket fra stengene. Fest ringen rundt roten av din penis og la den være der.


4

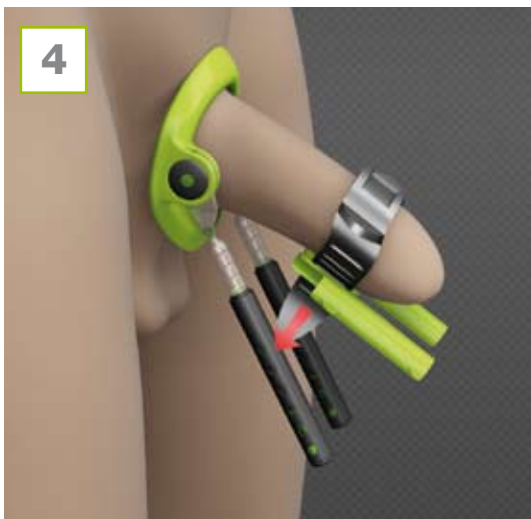

Tilpasse komfort stropp

Fest og stram stroppene bak penishodet. Hvis du ikke er omskåret kan stroppen plasseres over forhuden eller under, etter hva du finner mest komfortabelt.


5

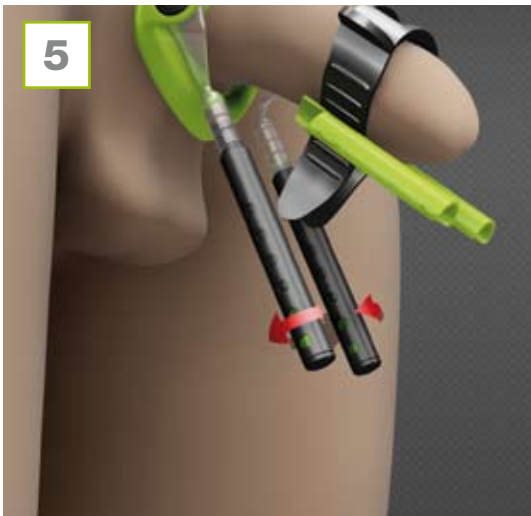

Justere lengden på stangen

Roter stengene med klokken en kvart runde og dra stengene utover til den ønskede lengden.

6

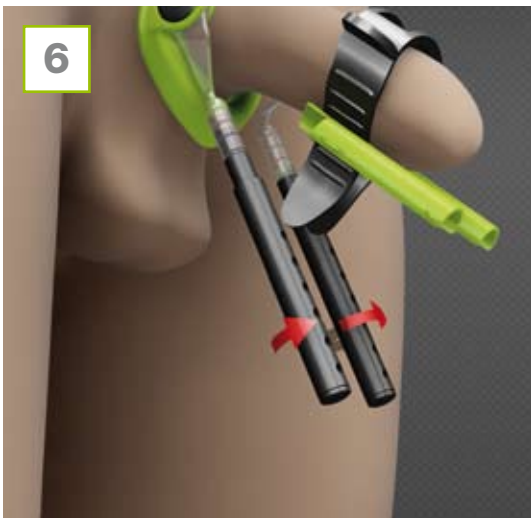

Fikse lengden på stengene

Når du er fornøyd med lengden på stengene, snu dem tilbake mot klokka, hør etter et 'dobbelt klikk'

7


Ikke overstrek stengene

Vennligst forsikre deg om at sidestengene bare er dratt ut så langt som det siste settet med hull. Hvis stengene sklir ut og mister festet, må du ganske enkelt presse den doble splitten sammen og dytte dem tilbake som vist på bildet.

8


Klikk på fronten til stengene

Når stengene er i riktig posisjon for deg, dytter du dem forsiktig tilbake mot kroppen din. Du må nå sikre front stykket fast på forlengelses stengene ved å dytte dem sammen. Igjen må du vente til du høre et klikk. Det vil fortelle deg at front stykket er riktig plassert.

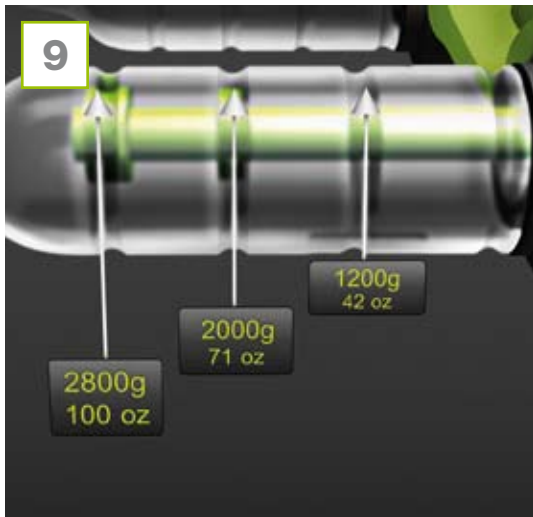

Les forlengelsen

Les verdiene på forlengelsen ved å plassere den indre spalten mot indikatorene på den gjennomsiktige sylinderen. Denne finner du rett over base ringen.

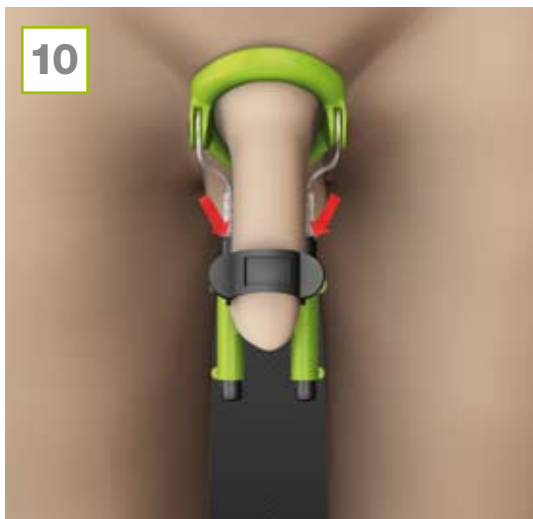

Øke strekkingen

Flytt forlengelses stengene framover ved å skyve dem forsiktig med tommelfingrene. Flytt stengene forover med ett klikk Husk å ikke flytte lenger enn det siste hullet på forlengelses stengene.

11 Langsom oppstart skjema

UKE	STREKK-KRAFT	TIMER/DAG
1	8-1200g / 28-42oz	1
2	8-1200g / 28-42oz	2
3	1200g / 42oz	3
4	1200g / 42oz	4
5	1200-2000g / 42-71oz	5
6	1200-2000g / 42-71oz	6

12 Bruke å vedlikeholde Male Edge

Male Edge har et fleksibelt design. Produktet kan manøvreres opp eller ned. På den måten kan du velge den posisjonen du finner mest komfortabel. Hvis du ønsker å bruke Male Edge på dagtid, kan den brukes under løst sittende bokser shorts og bukser. Den kan også brukes om natten, men det avhenger av dine søvn vaner. Noen beveger seg mye i søvne, mens andre ligger stille.

Male Edge har høy kvalitet men lavt vedlikehold. Både Male Edge og komfort stroppene kan enkelt og trygt vaskes i oppvaskemaskin. Forsikre seg om at du holder front stykket og forlengelsesstengene atskilte under rengjøringen.

Kontakt oss: post@maleedge.no / www.maleedge.no